

VERSA™ PRO

10

APLICATORI

25

TRATAMENTE

100+

OBIECTIVE ESTETICE



Acolo unde

INOVAȚIA,

întâlnește **VERSATILITATEA**

pentru a-ți maximiza profitul.



VENUS
VERSA PRO

Where

INNOVATION meets **VERSA**TILITY

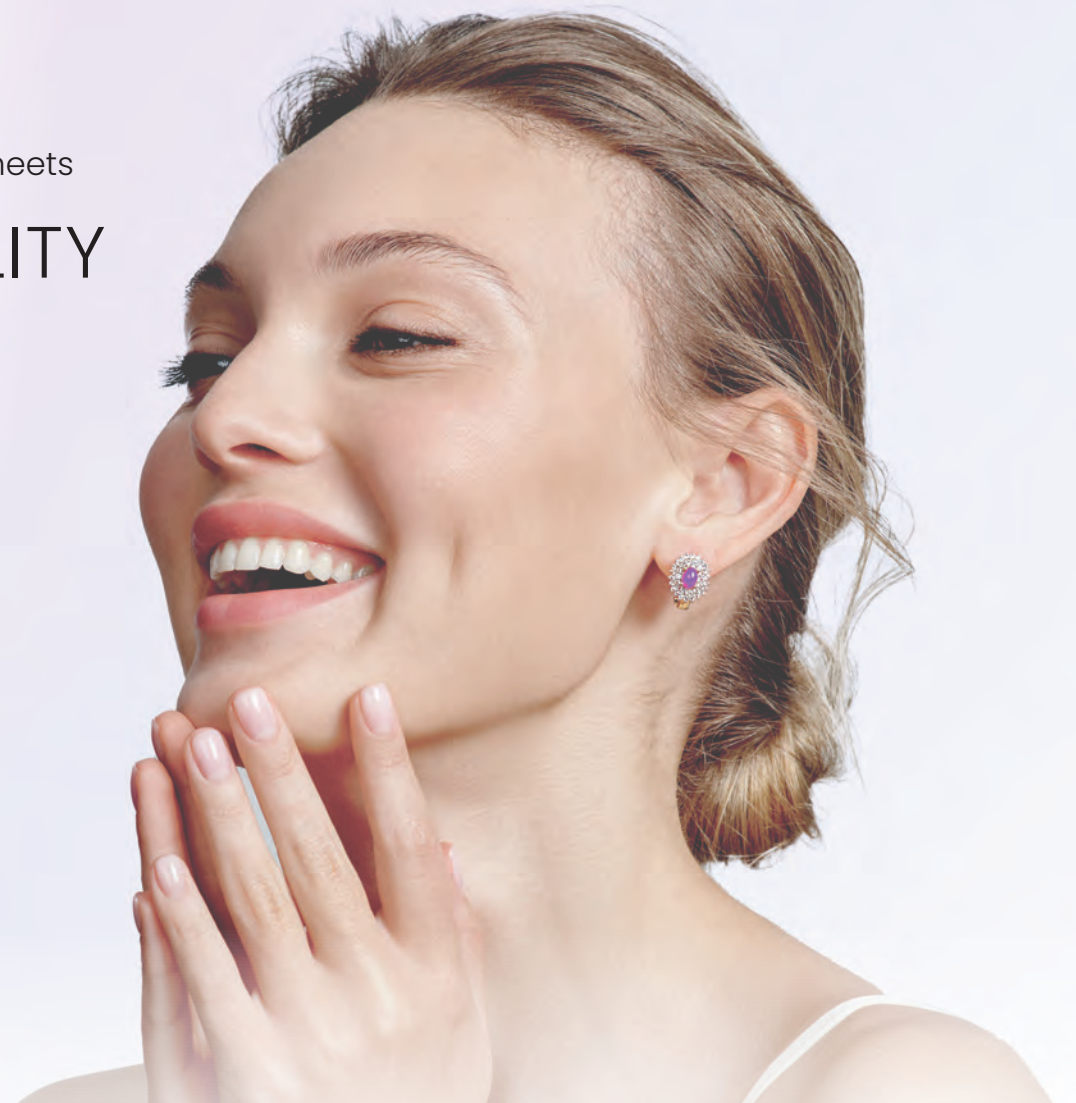


FOTO-REJUVENARE

Tratați leziunile pigmentare benigne și leziunile vasculare cutanate benigne.

TRATAMENTUL ACNEEI

Tratează acneea vulgaris.

EPILARE

Îndepărtează părul nedorit.

REFACEREA PIELII

Refaceți suprafața pielii pentru a aborda o gamă largă de iregularități texturale.

REDUCEREA RIDURILOR

Diminuează semnele de îmbătrânire, abordând problemele legate de laxitatea pielii.

REMODELARE CORPORALĂ

Reduce temporar celulita** și circumferința* și strânge pielea lăsată**.

*VENUS Versa™ Pro este indicat pentru tratamentul leziunilor benigne pigmentate epidermice și cutanate, precum și pentru tratamentul leziunilor vasculare cutanate benigne. Tratamentul leziunilor benigne pigmentate epidermice și cutanate, inclusiv discromie, hiperpigmentare, melasma, eflide (pistrui), lentigine, nevi și pete cafe-au-lait.

Tratamentul leziunilor vasculare cutanate benigne, inclusiv petele vasculare, hemangioame, telangiectazii faciale, trunchiale și ale membrelor inferioare, rozacee, eritemul rozaceei, angioame și angioame stelate, poikiloderma de Civate, vene varicoase ale membrelor inferioare și malformații venoase.

**Conturarea temporară a corpului prin strângerea pielii, reducerea circumferinței și reducerea celulitei sunt indicații aprobate în afara SUA. În SUA, VENUS Versa™ Pro este aprobat pentru tratamentul ridurilor faciale moderate până la severe și a liniilor de expresie la femei cu tipuri de piele Fitzpatrick I-IV.

IPL pentru Tratatamentul Acneei și Epilare

AC DUAL pentru Tratatamentul Acneei

VENUS Versa™ Pro oferă tratamente extrem de eficiente pentru acnee cu aplicatorul AC Dual. Utilizează tehnologia Intense Pulsed Light (IPL) pentru a furniza rafale directe de lumină albastră și roșie pe zonele vizate ale pielii.

Lumina albastră și roșie au capacitatea de a combate acneea și sunt cunoscute a fi cele mai eficiente atunci când sunt utilizate împreună pentru a trata atât cauzele chimice, cât și simptomele fizice ale acneei.

Lumina albastră vizează porfiringa produsă de Bacteria Propionibacterium Acnes, ducând la distrugerea acestei bacterii.

Lumina roșie pătrunde mai adânc în piele, țintind glandele sebacee obturate pentru a trata cauza acneei, vindecând rapid inflamația asociată acneei.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Lungime de undă: 415-480 nm, 630-950 nm • Energia optică: 5-25 J/cm² • Durata pulsului: 5-20 ms
- Dimensiune spot: 10 mm x 30 mm • Rata de repetiție a pulsului: peste 2 Hz



HR650 / HR650XL & HR690 / HR690XL pentru Epilare

Aplicatorii VENUS Versa™ Pro HR IPL sunt indicați pentru reducerea definitivă a părului și îndepărtarea părului nedorit.

Patru aplicatori disponibili cu dimensiuni standard și extra-mari:

- HR650 și HR690 de 10 mm x 30mm
- HR650 XL și HR690 XL de 20 mm x 30 mm

Tehnologia Intense Pulsed Light (IPL) este folosită pentru a furniza explozii directe de energie pe zonele de tratament, țintind melanina din firul de păr și distrugând părul activ la rădăcină.

Aplicatorii sunt echipați cu tehnologia SmartPulse™ patentată și cu răcire avansată în timp real, care îmbunătățește eficacitatea, siguranța și confortul tratamentului.


Ei furnizează energie în mod uniform și confortabil într-o gamă largă de zone de tratament, potrivite pentru părți mari ale corpului, cum ar fi pieptul, spatele și picioarele.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Lungime de undă: 690-950 nm, 650-950 nm • Energie optică: 5-20 J/cm² • Durata pulsului: 20-50 ms
- Dimensiune spot: 10 mm x 30 mm (Standard), 20 mm x 30 mm (XL) • Rata de repetiție a pulsului: peste 3 Hz



Aplicatorul IPL este echipat cu SmartPulse™ și Real-Time Cooling:

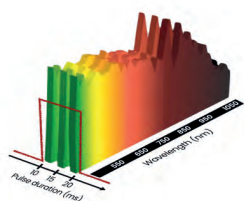

SmartPulse™ îmbunătățește funcționarea clinică prin asigurarea unei livrări precise și consistente de energie către ținta aleasă cu fiecare puls, oferind optimizarea pulsului pentru a menține lungimea de undă și intensitatea optimă a energiei pe tot parcursul tratamentului.



Sistemul de răcire în timp real detectează temperatura aplicatorului IPL de 1.000 de ori pe secundă pentru o eficacitate, siguranță și confort superioare pentru pacient. Nu există timp de nefuncționare pentru răcire - economisind timp și sporind productivitatea.

(MP)² for Remodelare Corporală

OctiPolar™ pentru Remodelare Corporală

Aplicatorul OctiPolar™ pentru VENUS Versa™ Pro este conceput pentru conturarea corpului*, strângerea pielii*, reducerea circumferențială*, reducerea celulitei* și reducerea ridurilor. Alimentat de tehnologia noastră proprie (MP)², este ideal pentru tratamente corporale mai mari, cum ar fi zonele abdomenului, spatelui și coapselor.



Tehnologia (MP)²

- combinația unică de radiofrecvență multipolară (RF) și câmpuri electromagnetice pulsate (PEMF).

- Multi-Polar RF oferă o încălzire mai rapidă și mai omogenă la mai multe adâncimi de țesut, ceea ce duce la rezultate clinice superioare și experiențe confortabile pentru pacient.
- Tehnologia PEMF este recunoscută pentru îmbunătățirea sintezei de collagen, promovarea proliferării fibroblastelor, îmbunătățirea fluxului sanguin și accelerarea procesului de vindecare.
- Aceste tehnologii sunt sigure pentru toate tipurile de piele și nu implică timp de nefuncționare.

Sistemul de Răcire în Timp Real

Aplicatorul OctiPolar™ este echipat cu senzori integrați care oferă feedback termic în timp real, permițând citirea ușoară și imediată a temperaturii pielii pe tot parcursul tratamentului.



SPECIFICAȚII TEHNICE

- Frecvența RF: 1 MHz • Puterea de ieșire RF: 0-150 W • Numărul de sintetizatoare (MP)²: peste 8
- Magnetic Pulse Frequency: 15 Hz • Pulsed Magnetic Field Flux: 15 Gauss

Revive, Renew, Radiate:
TRIPLE REJUVENATION

Experimentează o rejuvenare totală a pielii într-un singur tratament foarte avansat. Sinergia exclusivă a trei moduri puternice de acțiune îmbunătățește **tonusul pielii, fermitatea și netezește textura** – numai cu **VENUS Versa™ Pro**.



PHOTO-REJUVENATION
SR515 & SR580

Tratați leziunile pigmentate benigne și leziunile vasculare cutanate benigne cu tehnologia SmartPulse™.



ANTI - AGING
DIAMONDPOLAR™

Reduceți ridurile și laxitatea pielii* cu căldură omogenă pentru producția de collagen și fibroblaste.



SKIN RESURFACING
VIVA™ MD

Îmbunătățiți textura și alte iregularități ale pielii cu vârful brevetat și tehnologia SmartScan™.

*În SUA, VENUS Versa™ Pro este aprobat pentru tratamentul ridurilor faciale moderate până la severe și a liniilor de expresie la femei cu tipuri de piele Fitzpatrick I-IV.

IPL pentru Fotorejuvenare

VENUS Versa™ Pro oferă doi aplicatori de fotorejuvenare, SR515 și SR580, care abordează principalele semne ale îmbătrânirii și pielii deteriorate.

Aplicatorii tratează eficient o gamă largă de leziuni pigmentare și vasculare benigne, inclusiv rozacee, melasma, lentigine, eflide, telangiectazii, angioame, pete vasculare, hiperpigmentare și alte probleme comune ale pielii.


Aplicatorii de fotorejuvenare utilizează tehnologia luminii intens pulsate (IPL) pentru a livra impulsuri directe de energie către zonele țintă ale pielii.

IPL-ul este absorbit de cromoforii țintă – și anume, oxihemoglobina pentru leziunile vasculare și melanina pentru leziunile pigmentare.



Aplicatorii IPL

sunt echipați cu SmartPulse™ și Real-Time Cooling:

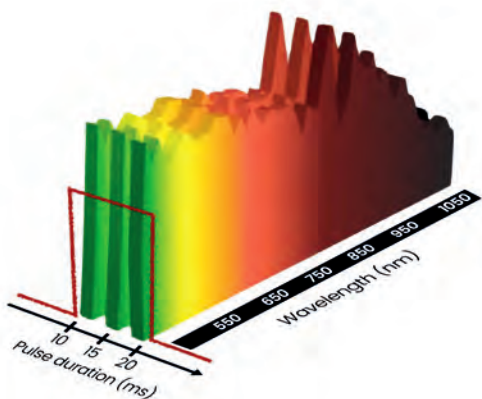

SmartPulse™ îmbunătățește operațiunea clinică prin asigurarea livrării precise și consecvente a energiei către ținta aleasă cu fiecare puls, oferind optimizarea pulsului pentru a menține lungimea de undă și intensitatea energiei ideale pe tot parcursul tratamentului.

Sistemul de răcire în timp

real detectează temperatura aplicatorului IPL de 1000 de ori pe secundă pentru o eficacitate, siguranță și confort superioare ale pacientului. Nu există timp de nefuncționare pentru răcire, economisindu-vă timp și sporind productivitatea.



SPECIFICAȚII TEHNICE

- Lungime de undă: 515–950 nm (SR515), 580–950 nm (SR580) • Energia optică: 5–25 J/cm²
- Durata pulsului: 5–20 ms • Dimensiune spot: 10 mm x 30 mm • Rata de repetiție a pulsului: peste 3 Hz

DiamondPolar™ Anti-Îmbătrânire

Aplicatorul DiamondPolar™ al VENUS Versa™ Pro este special conceput pentru tratamente de strângere a pielii* și reducere a ridurilor pentru față, gât și zone mai mici ale corpului.

Îmbunătățește producția de colagen și elastină pentru a reduce vizibil aspectul liniilor fine, ridurilor și liniilor de expresie.

Tehnologia (MP)²

Tehnologia (MP)² - combinația unică de radiofrecvență multipolară (RF) și câmpuri electromagnetice pulsate (PEMF).


Radiofrecvența multipolară oferă o încălzire mai rapidă și mai omogenă la multiple adâncimi ale țesuturilor, cu rezultate clinice superioare și experiențe confortabile pentru pacient.

Tehnologia PEMF este recunoscută pentru îmbunătățirea sintezei de colagen, promovarea proliferației fibroblastelor, îmbunătățirea fluxului sanguin și accelerarea procesului de vindecare.

Aceste tehnologii sunt sigure pentru toate tipurile de piele și nu implică timp de nefuncționare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Frecvența RF: 1 MHz • Puterea de ieșire RF: 0-150 W • Numărul de sintetizatori (MP)²: peste 8
- Frecvența pulsului magnetic: 15 Hz • Fluxul câmpului magnetic pulsat: 15 Gauss

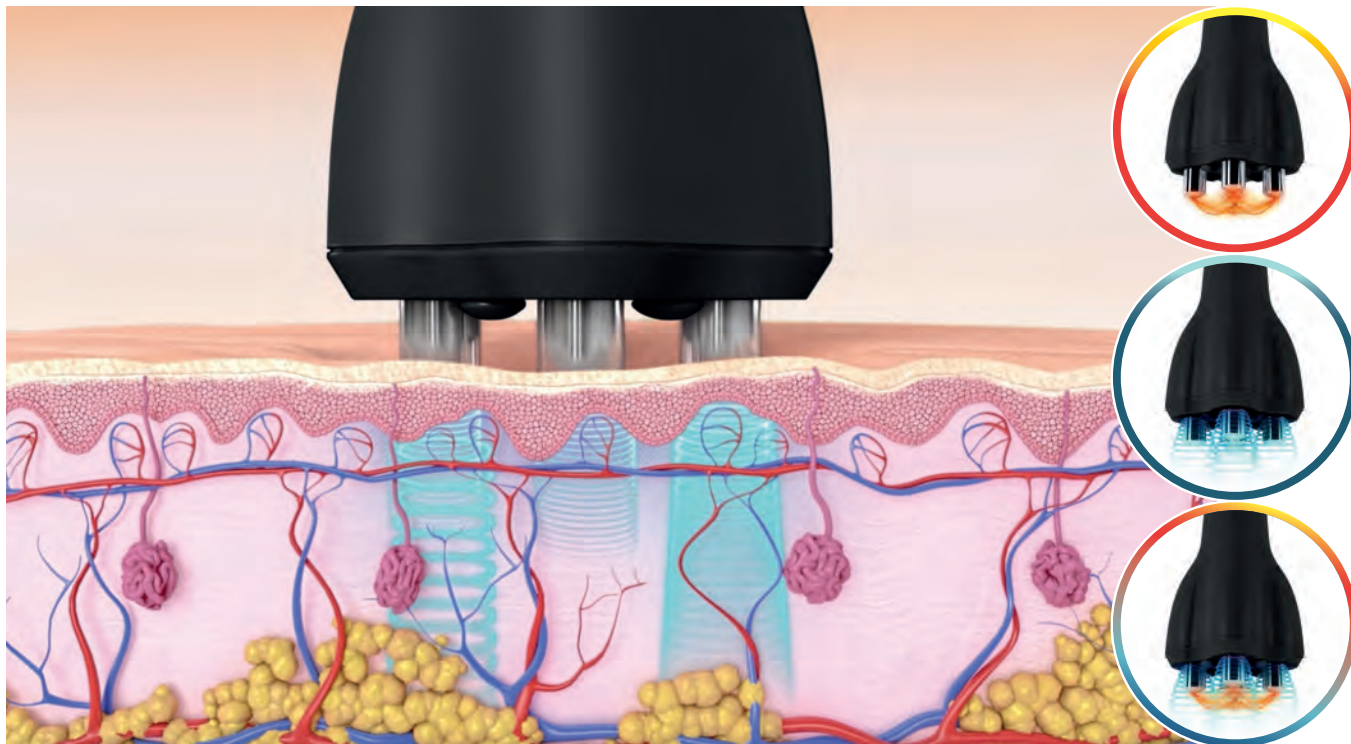

VIVA™ MD pentru Refacerea Pielii

VENUS Versa™ Pro oferă aplicatorul NanoFractional RF™ pentru refacerea pielii. Permite controlul total al operatorului asupra ablației și coagulării pentru o eficacitate sporită în abordarea unei game largi de preocupări ale pacienților.



The VENUS Versa™ Pro permite **personalizarea tratamentului** cu două opțiuni de vârf:

- 160 PIN TIP pentru iregularități mai ușoare ale texturii pielii, cum ar fi liniile fine, discromia și porii măriți
- 80 PIN TIP pentru probleme mai severe ale pielii, cum ar fi cicatrici de acnee/alte cicatrici, vergeturi și riduri profunde

Tehnologia NanoFractional RF™

● Utilizează radiofrecvență și tehnologia de top a vârfului brevetat, cu cea mai mare dimensiune a spotului din industrie și oferă până la 700 de impulsuri.


● Cantitatea precisă de energie RF (62 mJ/pin pentru vârful de 80 de pini și 124 mJ/pin pentru vârful de 160 de pini) este livrată fiecărui pin individual și uniform.

● Densitatea energetică ridicată este distribuită printr-o amprentă mică pe pin (150 x 20 microni), lăsând suficient țesut intact între ele pentru o vindecare mai rapidă a rănilor, un aspect uniform a țesutului după tratament și un timp de nefuncționare redus.



Tehnologia SmartScan™

Aplicatorul NanoFractional RF™ utilizează propria tehnologie SmartScan™, care folosește un algoritm unic pentru a scana între grupuri aleatorii de patru pini. Acesta livrează energie la densități variabile ale zonei de impact într-un singur vârf, permițând flexibilitate și control pentru tratamente sigure pe toate tipurile de piele.

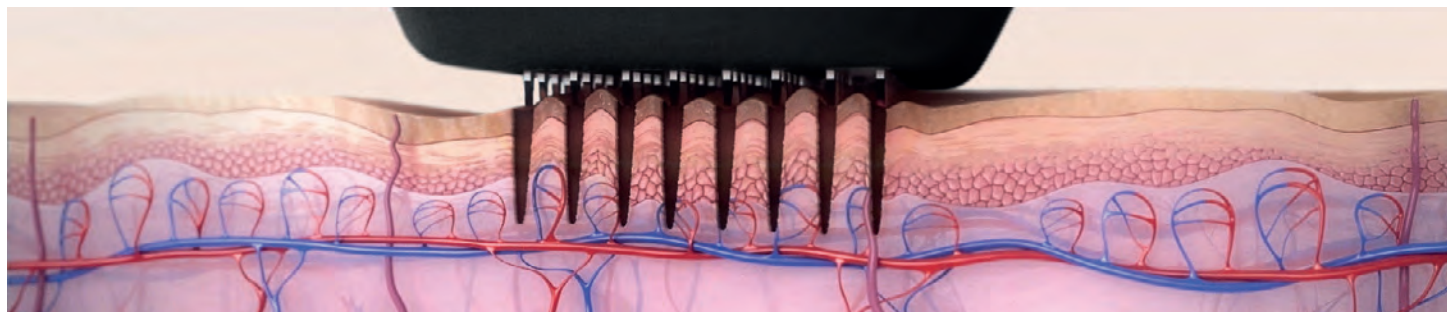

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Număr de pini: 80, 160 • Frecvența RF: 0.46 MHz • Puterea de ieșire RF: 0-8W • Densitatea energiei: 7.5 J/cm²
- Puterea max de ieșire: 62 mJ/pin (160 pin tip), 124 mJ/pin (80 pin tip) • Adâncimea max de penetrare: 750 micron (80 pin tip)

TRIBELLA™ Protocol de Tratament

TriBella™ folosește cei trei aplicatori într-o anumită ordine, cu un interval de 10 minute între tratamentele individuale:

- **SR515 / SR580** Fotorejuvenare
- **DiamondPolar™** Anti-îmbătrânire
- **VIVA™ MD** Refacerea Pielii

DURATA: Aproximativ 1.5 ore

NUMĂR DE TRATAMENTE: Trei

FRECVENȚA: La fiecare 4-5 săptămâni

Cele mai bune rezultate sunt vizibile aproximativ la trei luni după a treia serie de tratamente. Pentru întreținere, o serie de tratamente la fiecare șase luni este ideală.

Rezultat după 1 tratament TriBella™



Courtesy of VENUS

Rezultat după 3 tratamente TriBella™



Courtesy of Jason D. Bloom, MD

Rezultat după 3 tratamente TriBella™



Courtesy of Bowie Aesthetics & Wellness LLC

REZULTATE RELEVANTE

IPL

Rezultate după 1 tratament
SR580



Courtesy of Bowie Aesthetics & Wellness LLC

Rezultate după 1 tratament
AC Dual



Courtesy of Quantum Klinik

Rezultate după 2 tratamente
HR690



Courtesy of Venus

NANOFRACTIONAL RF™

Rezultate după 3 tratamente
NanoFractional RF™



Courtesy of Brow & Beauty

Rezultate după 3 tratamente
NanoFractional RF™



Courtesy of Stephen Eubanks, MD

Rezultate după 4 tratamente
NanoFractional RF™



Courtesy of Montclair Rejuvenation Center

(MP)²

Rezultate după 8 tratamente
OctiPolar™




Courtesy of View Laser Skin Rejuvenation

Rezultate după 6 tratamente
DiamondPolar™



Courtesy of Saks Beauty Northallerton

Rezultate după 8 tratamente
OctiPolar™

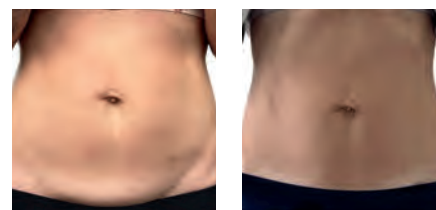

Courtesy of Tbeau Laser & Skin Rejuvenation Centre

ANGAJAMENTUL NOSTRU



PROGRAM EDUCAȚIE

- Program de instruire și educație la nivel internațional.
- Formare clinică și suport oferite de specialiști esteticieni cu înaltă calificare și experiență.
- Sesiuni virtuale de suport clinic.
- Acces online 24/7 la instruire clinică.



PROGRAM PENTRU CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE

- Echipa noastră de experți în marketing oferă conținut de top pentru lansarea, promovarea și dezvoltarea afacerii dvs.
- Serii de instruire, strategii și resurse dedicate personalului de marketing și vânzări.



SUPORT PENTRU MARKETING


- Acces la materiale de marketing descărcabile pentru promovarea noilor tratamente VENUS în clinica dvs.
- Listarea pe site-ul nostru „Clinic Finder” pentru a atrage noi pacienți.
- Instrumente și resurse educaționale pentru pacienți.



ACTUALIZARE UȘOARĂ

- Acces continuu la cele mai noi tehnologii inovatoare
- Posibilitate de upgrade imediat, inclusiv în timpul unui contract activ.
- Asigură menținerea tehnologiei la standarde actuale

PENTRU
SUCCESUL
TĂU

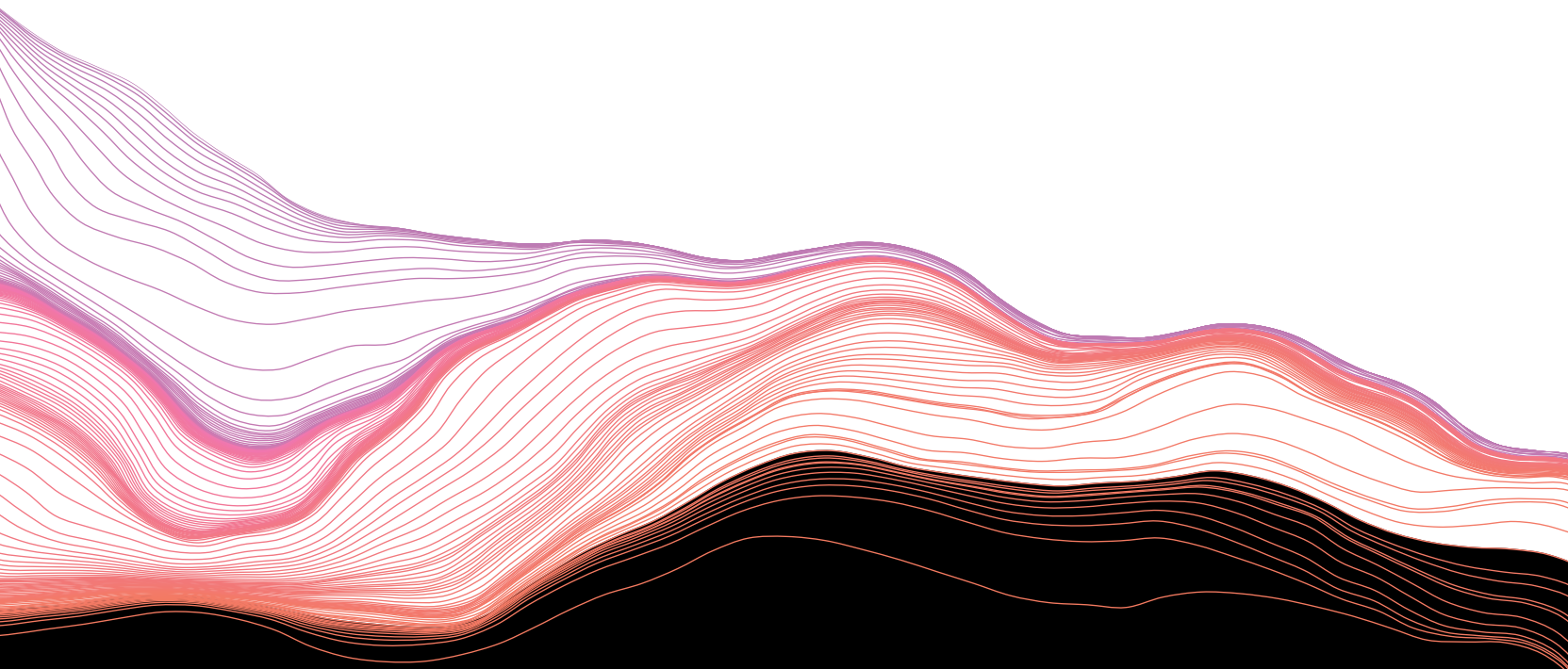

MED GROUP CONCEPT SRL

📞 0786 739 848
🌐 www.med-group.ro
✉ office@med-group.ro

